

PEP

IMT



Ürün No

8684278842245

8684278842252

Versiyon/Model

İnhalasyon + Mukus Ağzılıklı Sistem

İnhalasyon + Mukus Maskeli Sistem

Katalog No

BİO-0005

BİO-0006

PEP+IMT

TR Nefes alırken abdominal solunumu indükleyerek diyaframı güçlendirir. Akciğer kapasitesini artırır, egzersiz kapasitesini artırmak için laktik asit salgılanmasını geciktirir. Nefes verme kaslarını güçlendirerek balgamin akciğerlerden ve hava yollarından boşaltılmasına yardımcı olur.

EN Strengthens the diaphragm by inducing abdominal breathing when inhaling. Increases lung capacity, delays the secretion of lactic acid to improve exercise capacity. Helps to drain sputum from the lungs and airways by strengthening the exhalation muscles.




BK Grup İlaç Sağlık Danışmanlık

Üretici : BK Grup İlaç Sağlık Danışmanlık Tic. ve San. Ltd. Şti.

Adres : Kazım Kara Bekir Paşa Mahallesi Kongre Caddesi Hasır Han

İş Merkezi No: 6/131 Yakutiye 25100 Erzurum TÜRKİYE

E-Mail: bkgrupturkey@gmail.com - Gsm : +90 555 189 15 14

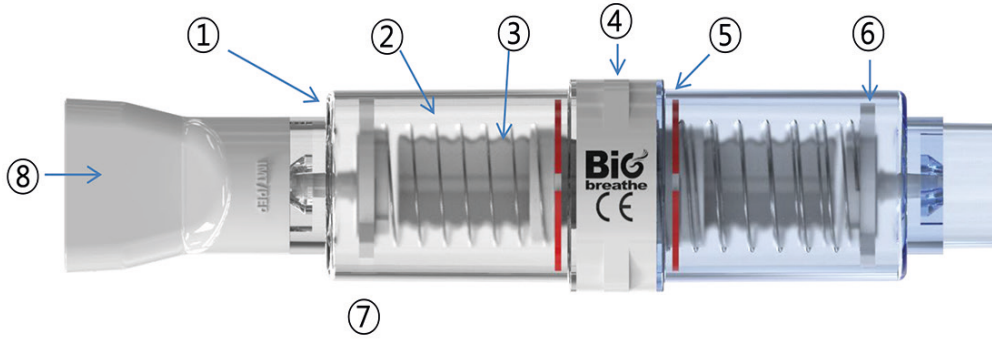

IMT/PEP			
Parça Adı	Material Malzeme	Role - Rol	Size - Ebat
Body - Gövde	PC	Body - Gövde	3.6 x 18 x 3 (cm) 50g
Spring - Yay	SUS304	Spring to control the pressure - Basıncı kontrol etmek için yay	
Refulator - Regülatör	ABS	Spring guide: It acts as a pressure regulator by adjusting the position of the spring guide. Yay kılavuzu: Yay kılavuzunun konumunu ayarlayarak basınç regülatörü görevi görür.	
Adapter Connection Adaptör Bağlantısı	ABS	Body - Gövde , Pressure regulator - Pressure regulator, You can adjust the pressure when rotating by connecting the body and the pressure regulator from the inside. - Gövde ve basınç regülatörünü içeriden bağlayarak dönerken basıncı ayarlayabilirsiniz.	
Spring Guide Yay Kılavuzu	ABS	Pressure regulator - Basınç düzenleyici, The spring is seated and coupled to the screw of the pressure regulator to move up/down. Yay oturur ve yukarı/aşağı hareket etmek için basınç regülatörünün vidasına bağlanır.	
Disc Frame Disk Çerçevesi	ABS	Body - Gövde, Seat - Oturak, It is assembled with silicon on the seat portion of the body to open and close according to the pressure direction. Gövdenin oturak kısmına basınç yönüne göre açılıp kapanacak şekilde silikonla birleştirilmiştir.	
Silicone - Silikon	Silicone	Adjusts the amount of air coming in. İçeri giren hava miktarını ayarlar.	
Nozzle - Ağızlık	pp	The part where I bite the mouthpiece and breathe. Ağızlığı ısırıp nefes aldığım kısım.	



Hastane Tipi : Satürasyon değeri düşmüş acil hastalar, yoğun bakım hastaları ve tüm oksijen cihazlarıyla tamamen uyumlu olarak kullanılmaktadır.

Hospital Type : It is fully compatible with emergency patients with low saturation values, intensive care patients and all oxygen devices.



Uluslararası Distribütör : Kaplan Ecza Deposu Tic. ve San. Ltd. Şti.

Adres: Şükrüpaşa Mahallesi Semt Garajı Caddesi No:96

Yakutiye 25100 Erzurum TÜRKİYE

E-mail: kaplaneczadeposu@gmail.com - **Gsm:** +90 552 410 72 20

www.kaplaneczadeposu.com